

ANESTESIA
Epidural guiada por ecografía

una luz en la oscuridad

www.vygon.es


**VYGON**
Value Life

Tu aliado en las nuevas técnicas de anestesia regional

La Epidural guiada por ecografía, se hace más fácil gracias a la Aguja RAFA y la jeringa Epimatic.

La aguja ecogénica Rafa® Tuohy:

- Recubrimiento Granuloso de la aguja hasta la punta para mejorar la calidad de visión mediante los sistemas ecográficos.
- Desarrollada con el Dr. Rafael Blanco, Hospital Universitario de A Coruña (España).
- Alternándose el recubrimiento granuloso y metálico cada centímetro

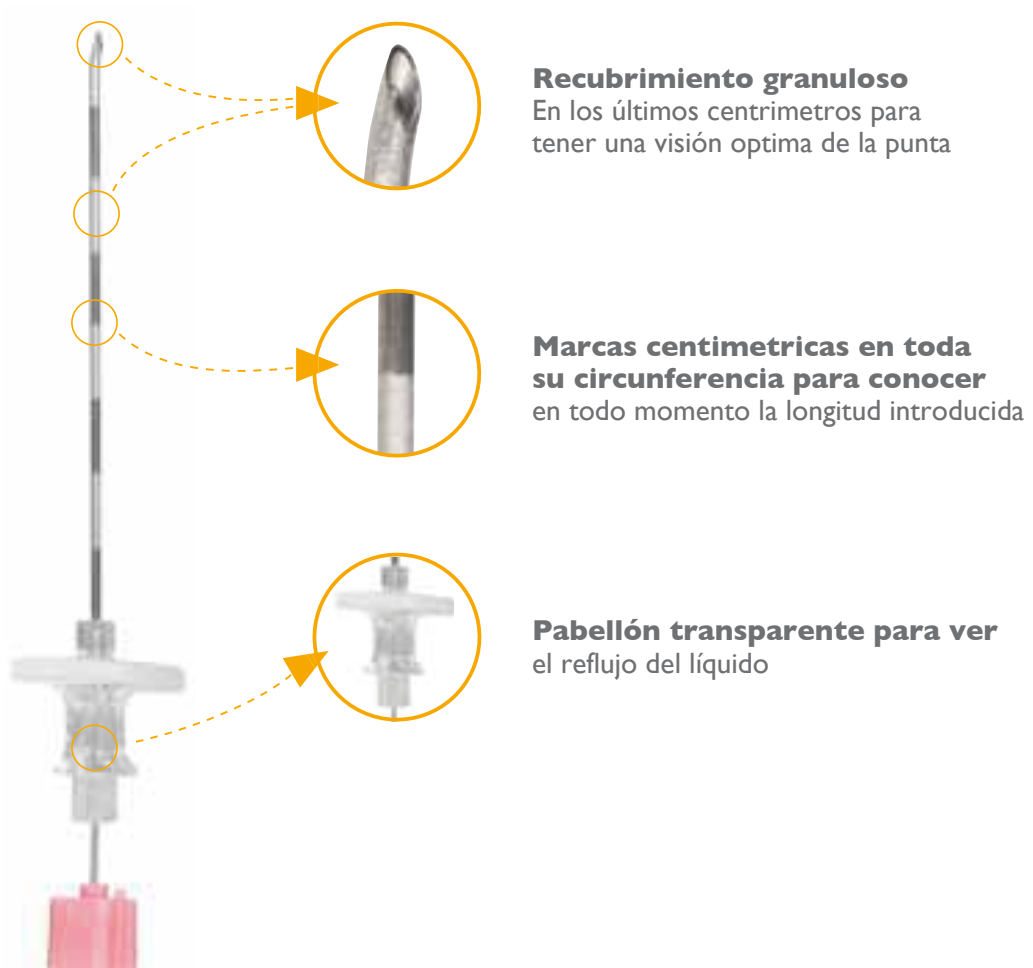

Recubrimiento granuloso
En los últimos centímetros para tener una visión óptima de la punta

Marcas centimétricas en toda su circunferencia para conocer
en todo momento la longitud introducida

Pabellón transparente para ver
el reflujo del líquido

Ref: 6084.881 - G18- 80mm



● Jeringa **Epimatic®**: solo con una mano

El espacio epidural se detecta automáticamente gracias al dispositivo elástico patentado.



10 ml jeringa de baja resistencia, Luer Slip
Ref: 1018.102

La aguja Rafa and la jeringa Epimatic están disponibles como productos independientes o para ser incluidos como componentes dentro de Vysets.

Para la técnica Epidural con ecógrafo, le ofrecemos una completa gama de catéteres y paños pelables diseñados especialmente para esta técnica, así como una selección de otros productos incluyendo fundas para las sonda y gel, toallas, mangos con esponjas y cúpulas.

La elección es suya.



Para más información, póngase en contacto: comercial@vygon.es

Las especificaciones contenidas en este folleto son únicamente informativas y no son, en ningún caso, de naturaleza contractual.

Vygon – Ciudad de Sevilla, 34. Pol. Ind. Fuente del Jarro • 46988 • PATERNA • VALENCIA

Recepción: 902.876.288 – Servicio contables: 961.344.364

Servicios de marketing: 961.344.745 – Servicios comerciales: 902.876.288

Fax.: 902.876.289 • www.vygon.es

